



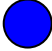




БЕЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА.

Основные характеристики

Сорт	Уд. вес, г/м ²	Время фильтрации	Свойства	Основные применения
388  «черная лента»	80	10 с	Крупнопористая, мягкая бумага с губчатой (рыхлой) структурой, очень высокая скорость фильтрации	Хлопьеподобные и грубые осадки, коллоиды: гидроксиды железа, алюминия, хрома, сульфиды меди, висмута, кобальта, железа, различные металлорганические осадки; определение кремния при анализе сталей.
389  «белая лента»	80	20 с	Средний размер пор, высокая скорость фильтрации	Крупнодисперсные осадки: сульфиды серебра, мышьяка, аммония, кадмия, свинца, железа и марганца, хромат свинца, карбонаты щелочноземельных металлов и т.д. Сорт, наиболее широко используемый для аналитических работ.
389 F  «желтая лента»	80	20 с	Средний размер пор, высокая скорость фильтрации, низкое содержание жира	Крупнодисперсные осадки. Особенно удобен для определения жира в природном сырье
390  «зеленая лента»	80	100 с	Узкие поры, плотная, низкая скорость фильтрации	Фильтрация мелких осадков: сульфат бария, молибдат свинца, диоксид свинца, гидроксид кальция, фторид кальция, сульфид никеля, сульфид олова и т.д.
391  «синяя лента»	80	180 с	Мелкопористая, очень плотная, очень низкая скорость фильтрации	Мелкозернистые осадки: холодно-осажденный сульфат бария, оксид меди и т.д.
392  «красная лента»	80	50 с	Средняя плотность, умеренная скорость фильтрации	Быстрая фильтрация тонких осадков: магниевый-аммониевый фосфат, магниевый-аммониевый арсенат и т.д.
393  «фиолетовая лента»	100	250 с	Самая низкая скорость фильтрации, особо мелкие поры и высокая плотность, наиболее эффективная фильтрация наиболее мелких осадков	Особенно трудные условия фильтрации, мелкозернистые осадки: сульфат бария, оксид меди и т.д.

ПРАЙС – ЛИСТ.

Диаметр, мм	Цена/упаковку (100 шт.), евро	
	Сорт: 388, 389, 389F, 390, 391, 392	Сорт: 393
Дисковые фильтры		
55	10,62	14,16
70	13,57	18,29
90	20,65	25,96
110	28,32	35,99
125	33,63	41,30
150	47,20	54,87
185	71,98	80,83
240	112,10	120,95

Цены указаны в евро с учетом НДС(18%),
 Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения платежа.